

L'USAGE UNIQUE COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VU

L'aScope™ 5 Broncho d'Ambu® combine le haut niveau de manœuvrabilité et d'imagerie nécessaire dans la salle de bronchoscopie avec la stérilité et l'efficacité du concept d'usage unique. Résultat : Performances élevées constantes, stérilité et flexibilité requises pour un flux de travail complexe et exigeant. Il est compatible avec l'unité d'affichage et de traitement Ambu® aBox™ 2 en résolution Full HD, qui peut facilement être connectée à des moniteurs externes.





L'aScope 5 Broncho offre en permanence des performances élevées et une excellente maniabilité, soutenues par une nouvelle fonction de rotation et une conception intelligente.

EXCELLENTE MANIABILITÉ

Atteinte des zones difficiles d'accès de l'arbre bronchique :

La combinaison des angles de béquillage 195° vers le haut et vers le bas, de la plage d'angulation de l'embout distal et de la flexibilité du tube d'insertion est conçue pour vous aider à atteindre les zones difficiles d'accès de l'arbre bronchique. Vous remarquerez l'excellente maniabilité, notamment lorsque vous travaillez avec un instrument d'endothérapie.

La rotation gauche/droite à 120° est conçue pour vous permettre d'ajuster la position de l'extrémité distale afin de faciliter la navigation et l'insertion des instruments d'endothérapie.

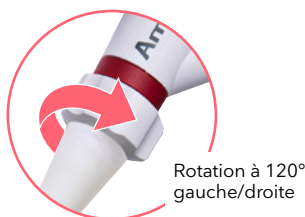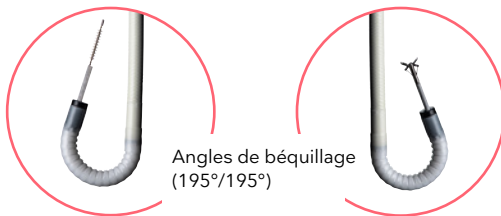



Ambu® aScope™ 5 Broncho

IMAGERIE DE NIVEAU SUPÉRIEUR

Puce de caméra haute résolution et unité d'affichage et de traitement Full HD (12,8") : L'aScope 5 Broncho et l'aBox 2 fonctionnent ensemble pour fournir une imagerie supérieure.

Excellente qualité d'image :

Le traitement des images avancé, le champ de vision à 120 degrés et le système HD de 3 à 100 mm de profondeur de champ avec commande automatique adaptative avancée vous donnent l'image claire et lumineuse nécessaire pour la procédure.

Visibilité améliorée :

L'algorithme exclusif d'amélioration du contraste rouge avancé (ARC) d'Ambu est destiné à améliorer la visibilité des tons rouges dans l'image sans altérer l'aspect naturel.

Prise, lecture et documentation faciles des images et des vidéos

D'une simple pression sur l'un des boutons du bronchoscope, vous pouvez zoomer en avant et en arrière, capturer des images et des vidéos et les examiner après la procédure avec des patients ou des collègues. Enfin, la compatibilité avec les serveurs PACS et les logiciels de dossiers médicaux électroniques rend la documentation simple et efficace.

CONTACTEZ-NOUS POUR DEMANDER UNE DÉMONSTRATION

Configurer l'aScope 5 Broncho et l'aBox 2 sur votre lieu de travail afin que vous puissiez le prendre en main et le voir par vous-même est rapide et simple.

Ambu FOREVER FORWARD

Ambu® aScope™ 5 Broncho est un bronchoscope flexible à usage unique, stérile, destiné à être utilisé pour l'accès endoscopique et l'examen de l'anatomie aérienne. Dispositif médical de classe IIa - Organisme notifié BSI (CE 2797). Veuillez lire attentivement le mode d'emploi. Pour toutes questions relatives à la matériovigilance : vigilance.fr@ambu.com ou www.ansm.sante.fr Document réservé à l'usage des professionnels de santé.

Distributeur Ambu SARL

Les Bureaux du Parc Avenue J-G Domergue
33070 Bordeaux Tel. 05 57 92 31 50 - www.ambu.fr

Fabricant Ambu A/S

Baltorpbakken 13 DK-2750 Ballerup

PUBSPS - PULMO - JUIN2022 - 003

